

## イージーセンス 1 リンクファームウェアのアップデート方法

### ●インストール用データの準備

1. イージーセンス 1 リンクファームウェアファイルを、イージーセンスホームページよりコンピュータへダウンロードします。
2. ダウンロードした圧縮フォルダーを右クリックし、解凍(又は全て展開)を選択して解凍してください。

### ●アップデート作業


1. 解凍したフォルダー内の .exe ファイルをダブルクリックします。
2. イージーセンス 1 リンクを USB ケーブルでコンピュータに接続します。※1  
1 リンク内のプログラムが書き換えられていることを示すプログレスバーが現れます。※2

※注意：このステップ中、1 リンクをコンピュータから外さないでください。プログラム書き換え中にコンピュータから本体が外されると、本体が破損し使えなくなる場合があります。

3. チェックが表示されたら、正常にバージョンアップ完了です。※3



※プログラムの書き換え中にエラーが発生すると  
×マークが現れます。1 から作業しなおしてください。

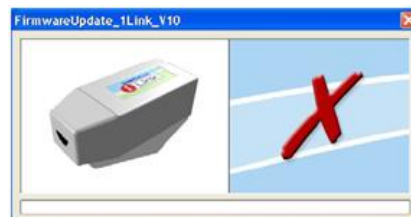

4. すべての作業が終了したら、イージーセンス 1 リンクをコンピュータから外して、ファームウェアアップデートのプログラムを終了してください。

以上でアップデートは完了です。

**株式会社 ナリカ**  
(旧 中村理科工業株式会社)

<http://www.rika.com/>

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10  
TEL 03(3833)0741 (代) FAX 03(3836)1725  
仙台営業所 〒981-0932 仙台市青葉区本町5-14 サン・レイ102  
TEL 022(272)8138 FAX 022(774)1955  
大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-16 米田中津ビル 5階  
TEL 06(6451)3986 FAX 06(6451)3925  
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-7 博多東エースビル 7階  
TEL 092(432)6888 FAX 092(432)7388  
サポートセンター ☎ 0120-700-746  
E-mail: support@rika.com